

xiaomi

Vibračná elektrická zubná kefka

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Pri prvom použití zubnej kefy sa často vyskytuje svrbenie alebo krvácanie ďasien, čo možno pripísať tomu, že ďasná ešte nie sú zvyknuté na efektívne čistenie zubnou kefkou. Odporúča sa začať s režimom šetrného čistenia. Tieto ťažkosti sa zvyčajne vyriešia v priebehu jedného až dvoch týždňov. V prípade, že pretrvávajú dlhšie ako dva týždne, okamžite prestaňte zubnú kefkou používať a vyhľadajte lekársku pomoc.




VAROVANIA:

- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí okrem prípadov, kedy im boli poskytnuté usmernenia a dohľad pri používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Spotrebič ani batériu nevystavujte vysokým teplotám.
- Budte si vedomí rizika skratu svoriek spotrebiča na batérie alebo batérie kovovými predmetmi.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
- Spotrebič obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
- Používajte výhradne s napájacím zdrojom <A520-050100U-EU1>.
- Zubnú kefkou nabíjajte a skladujte len pri teplote od 5 °C do 35 °C.
- Spotrebič je určený na použitie výhradne s priloženou napájacou jednotkou.

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.


Opis výrobku

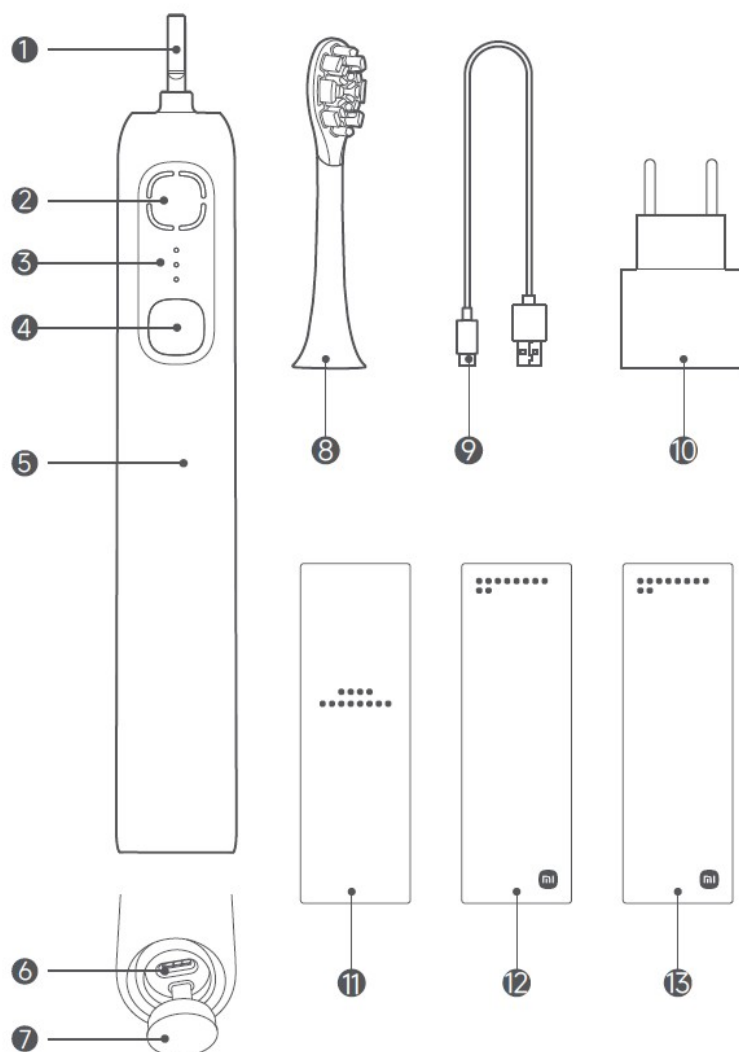

- 1) Kolíček
- 2) Kontrolka plochy čistenia
- 3) Kontrolka režimu/úrovne batérie
 - Jemný režim čistenia
 - Štandardný režim čistenia
 - Režim silných vibrácií
- 4) Tlačidlo napájania
- 5) Rukoväť zubnej kefky
- 6) Nabíjací port
- 7) Kryt nabíjacieho portu
- 8) Hlava zubnej kefky
- 9) Nabíjací kábel typu C
- 10) Napájací adaptér
- 11) Sprievodca rýchlym štartom
- 12) Návod na obsluhu
- 13) Vyhlásenie o záruke


Nasadenie hlavy zubnej kefky

Udržujte smer štetín hlavy zubnej kefky v rovnakom smere ako predná časť rukoväte zubnej kefky, hlavu zubnej kefky nasadte na rukoväť smerom nadol a uistite sa, že medzi hlavou zubnej kefky a rukoväťou je mierna medzera (medzera je určená na to, aby zabránila nárazom hlavy zubnej kefky s rukoväťou počas vysokofrekvenčných vibrácií, aby sa vytvoril väčší výkon motora).

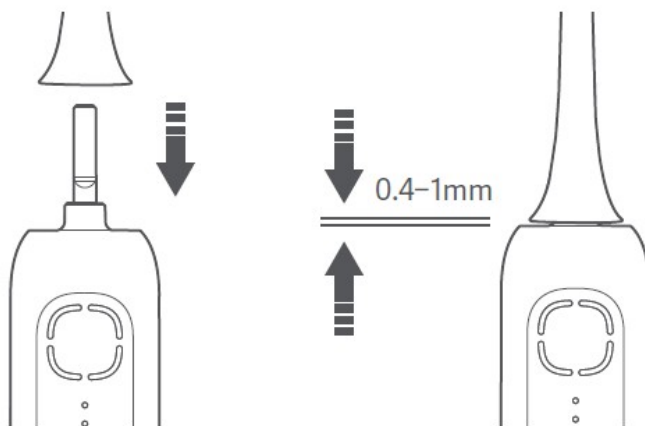

Spôsob použitia

Ovládanie tlačidiel

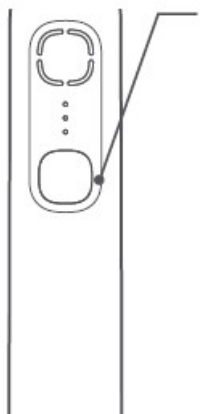


Zapnutie: Stlačením tlačidla zubnú kefku zapnete.

Prepínanie režimov/pauza: Do 10 sekúnd po zapnutí zubnej kefky stlačte tlačidlo, aby ste prešli režimami jemného čistenia, štandardného čistenia, režimom silných vibrácií a pauzy.

Po spustení zubnej kefky na 10 sekúnd ju stlačením tlačidla pozastavte.

Vypnutie: Po pozastavení alebo čistení sa zubná kefka po 12 sekundách nečinnosti vypne.

Po zdvihnutí sa opäť zapne.

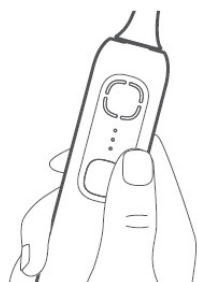

- Jemný režim čistenia: Vhodné pre ľudí s citlivými zubami
- Štandardný režim čistenia: Vhodný na každodennú ústnu hygienu
- Režim silných vibrácií: Vhodný na hĺbkové čistenie odolných škvŕn na zuboch

Poznámka:

Po zapnutí zubnej kefky je k dispozícii funkcia postupného zvyšovania výkonu počas 3 sekúnd a vibrácie sa postupne zvyšia v priebehu 3 sekúnd.


Každý režim čistenia trvá 2 minúty, potom sa zubná kefka automaticky zastaví.

Novým používateľom sa odporúča začať s režimom šetrného čistenia.

Zdravé čistenie zubov

Na dosiahnutie lepšieho účinku čistenia sa odporúča používať Bassovu metódu čistenia zubov a jemne pohybovať zubnou kefkou so štetinami umiestnenými pod uhlom 45° smerom k línii ďasien.

UPOZORNENIE: Zubná kefka sa každých 30 sekúnd nakrátko pozastaví, aby upozornila používateľa na potrebu zmeny umiestnenia kefky.

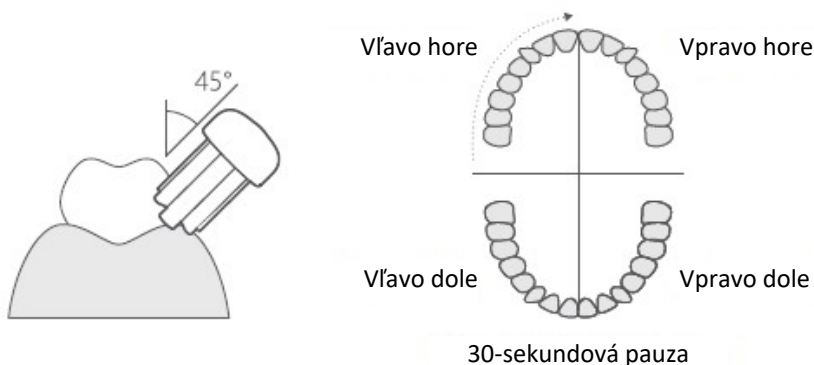

Pripomienka vynechanej plochy

Kontrolka plochy čistenia poskytne spätnú väzbu o aktuálnom čistení, keď je čistenie pozastavené alebo ukončené. Vyčistená plocha sa rozsvieti na bielo, zatiaľ čo vynechaná plocha sa rozsvieti na oranžovo.

UPOZORNENIE:

1. Pri čistení vynechanej plochy sa po dokončení všetkých plôch objaví krátka vibračná pauza, ktorá signalizuje potrebu zmeniť plochu čistenia.
2. Dĺžka dodatočného čistenia sa líši v závislosti od oblastí, ktoré ste pri čistení vynechali. Po vyčistení všetkých vynechaných plôch sa zubná kefka automaticky pozastaví a zobrazí výsledky čistenia.
3. Na dosiahnutie relatívne presných výsledkov čistenia sa odporúča udržiavať stabilnú polohu hlavy a počas čistenia zubov sa pozeráť priamo pred seba.



Starostlivosť a údržba

Čistenie hlavy zubnej kefky

1. Po umytí zubov hlavu zubnej kefky opláchnite pod tečúcou vodou.
2. Po opláchnutí oklepte vodu a umiestnite hlavu zubnej kefky na suché a dobre vetrané miesto, aby mohla vyschnúť na vzduchu.

* Podľa odporúčaní zubných lekárov by ste mali hlavu zubnej kefky vymieňať každé tri mesiace.



Nabíjanie

Spôsob nabíjania

Otvorte kryt nabíjacieho portu v spodnej časti rukoväte a na nabíjanie použite nabíjací kábel dodaný so zubnou kefkou.

Kontrolka úrovne batérie


Stav zubnej kefky	Úroveň batérie	Kontrolka úrovne batérie
Ovládanie	20 % – 100 %	Zobrazenie režimu namiesto úrovne nabitia batérie
	5 % – 20 %	Trikrát blikne na oranžovo a potom zhasne
Zubná kefka sa nedá zapnúť	0 % – 5 %	Bliká na oranžovo; zubná kefka trikrát zavibruje
Nabíjanie	100 %	Svieti na bielo
	0 % – 100 %	Pulzuje na bielo

Upozornenie:

Úplné nabitie zubnej kefky po vybití batérie trvá približne šesť hodín.

Detekcia vlhkosti nabíjacieho portu

Ak po pripojení nabíjacieho kábla k zubnej kefke kontrolka úrovne batérie naďalej bliká na oranžovo, znamená to prítomnosť kvapaliny v nabíjacom porte. Nabíjanie v tomto čase predstavuje riziko skratu a pred nabíjaním sa uistite, že je nabíjací port suchý.

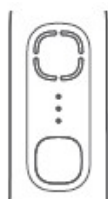

Odpojte nabíjací kábel

Ak je v nabíjacom porte prítomná tekutina, pokračujte v nasledujúcich krokoch čistenia:

1. Odpojte nabíjací kábel.
2. Nabíjací port držte smerom nadol a jemne ním zatraste, aby ste vypustili prebytočnú tekutinu.
3. Zubnú kefku a nabíjací kábel umiestnite na suché a dobre vetrané miesto, aby sa vysušili na vzduchu. Keď je zubná kefka úplne suchá, skúste ju znovu nabiť. Ak kontrolka úrovne batérie naďalej bliká na oranžovo, odporúča sa predĺžiť dobu sušenia, kým sa neobnoví normálne nabíjanie.



UPOZORNENIE: Na vysušenie nabíjacieho portu nepoužívajte papierové utierky, vatové tampóny a podobne, aby ste zabránili vniknutiu cudzích predmetov.

Ochrana životného prostredia


Keď zubná kefka dosiahne koniec svojej životnosti, treba z nej vytiahnuť vstavanú batériu a zlikvidovať ju alebo recyklovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu, v ktorom sa používa. Ak sa batéria nedá vybrať, zlikvidujte ju v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s komunálnym odpadom vo vašej oblasti.

VAROVANIA:


- Túto batériu nevystavujte ohňu. Inak hrozí riziko výbuchu batérie alebo uvoľňovania toxických či nebezpečných látok.
- Batériu neskratujte, aby nedošlo k jej vznieteniu a požiaru.
- Zubnú kefku rozoberajte len vtedy, keď ju chcete zlikvidovať, inak sa poškodí.
- Pred likvidáciou zubnej kefky najprv vyberte batériu.
- Batéria sa musí zo spotrebiča pred vyradením vybrať.
- Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej energie.
- Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať.

Vybratie nabíjateľnej batérie


1. Vložte plochý skrutkovač do medzery medzi spodným krytom rukoväte a telom zubnej kefky a páčte smerom nahor, kým sa spodný kryt neotvorí.

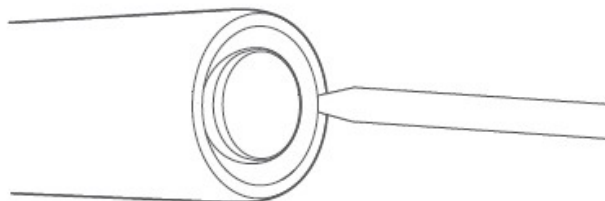

2. Pomocou plochého skrutkovača vypáčte pracku na oboch stranách vnútorného priestoru dovnútra, zatlačte predný hriadeľ napájania na tvrdý predmet a vytlačte vnútorný priestor zo zubnej kefky.

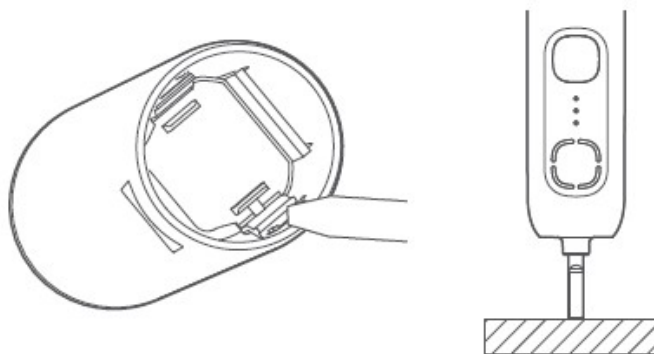

3. Pomocou klieští odstrihnite vodiče pripojenia batérie.
Vyberte batériu a odneste ju do oficiálneho recyklačného centra.

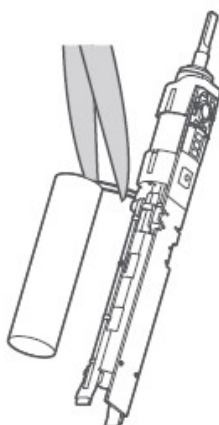

Riešenie porúch

Problémy	Možné príčiny	Riešenia
Zubná kefka sa nezapne.	Zubná kefka sa nabíja.	Odpojte nabíjací kábel od zubnej kefky.
	Slabá batéria.	Batériu včas nabite.
Hlavu zubnej kefky nemožno nasadiť.	V hlave zubnej kefky sú zachytené cudzie predmety.	Odstráňte cudzie predmety.
	Na kolíčku sú zachytené cudzie predmety.	Odstráňte cudzie predmety.
	Používa sa neoriginálna hlava zubnej kefky.	Nasadte originálnu hlavu zubnej kefky.
Hlava zubnej kefky slabo vibruje.	Hlava zubnej kefky nie je správne nasadená.	Opätovne nasadte hlavu zubnej kefky.
	Medzi hlavu zubnej kefky a rukoväť sa dostal cudzí predmet.	Odoberte hlavu zubnej kefky a predmet vyberte.
Kontrolka úrovne batérie šesťkrát zabliká na oranžovo a zubnú kefku nemožno zapnúť.	Prevádzková teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Používajte pri teplote okolia od 5 °C do 35 °C.

Technické parametre

Názov: Elektrická zubná kefka	Model: MES609
Menovitý príkon: 2,5 W	Menovitý vstup: 5 V – 1 A
Doba nabíjania: Približne 6 hod.	Krytie: IPX8
Typ batérie: ICR 18650 3,7 V1S1P 2000 mAh	

Napájací adaptér

Vstup: 100 – 240 V-, 50/60 Hz, 0,2 A Výkon: 5,0 V – 1,0 A, 5,0 W

Zverejnené informácie	Hodnota a presnosť	Jednotka
Názov výrobcu	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	---
Označenie modelu	A520-050100U-EU1	---
Vstupné napätie	100 – 240	V ~
Vstupná str. frekvencia	50/60	Hz
Výstupné napätie	5,0	V ===
Výstupný prúd	1,0	A
Výstupný výkon	5,0	W
Priemerná účinnosť v aktívnom stave	73,77	%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	64,588	%
Spotreba bez zaťaženia	0,075	W



Európa – Vyhlásenie o zhode pre EÚ

My, spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem, ako aj ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie.

Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko

contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,

Haidian District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Podrobný elektronický manuál nájdete na

www.mi.com/global/support/user-guide

Vyrobené v Číne



Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518